




Eingehende EDTA-Probe (**spätestens 24 h nach Abnahmezeitpunkt**)



Zentrifugieren ggf. mit anschließendem Einfrieren

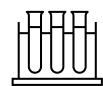


Bestimmung von Mesothelin und von Calretinin (***bis spätestens 3 Wochen nach Eingang***)



Unauffälliger Befund an Arzt/Ärztin




Cystatin C-Bestimmung ***bei auffälligem Biomarker-Befund***

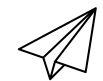

Cystatin C $\geq 1,7\text{mg/L}$: nicht benutzbarer Befund an Arzt/Ärztin



Wenn Biomarker auffällig und Cystatin C < 1,7 mg/L: Bestimmung von TSH

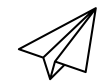

Auffälliger Befund inkl. Ausweisung des Cystatin-C- und des TSH-Wertes an Ärztin/Arzt